

ALLEGATO E



PROTOCOLLO PROVE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA, PER L'IGIENE E COLLEGATA ASSISTENZA INFERMIERISTICA E POST VENDITA

VALUTAZIONE:

			Moltip. X 10
1 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE PANNOLONI MUTANDINA CON ADESIVI	Punti max	6	60
2 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE PANNOLONI CON CINTURA	Punti max	23	230
3 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE PANNOLONI FISIOANATOMICO SAGOMATO	Punti max	2	20
4 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MUTANDINE ELASTICHE	Punti max	1	10
5 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE PANNOLINI TIPO ASSORBENTI	Punti max	1	10
6 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MUTANDINE ASSORBENTI SENZA ADESIVI	Punti max	1,5	15
7 VALUTAZIONE DELLA COMPLETEZZA DELLE TAGLIE DEI PRODOTTI	Punti max	1,5	15
8 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TRAVERSE	Punti max	8	80
9 VALUTAZIONE DELLE CREME	Punti max	2	20
10 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE SALVIETTE	Punti max	5	50
11 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE BAVAGLIE	Punti max	3,5	35
12 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE SALVAMATERASSO	Punti max	0,5	5
TOTALE		55	550

NOTA:

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione, i singoli punteggi sono moltiplicati per il fattore 10 e, al termine della procedura, divisi per la stessa cifra.

PANNOLONI TIPO MUTANDINA CON ADESIVI

PROVE PER ASSORBENZA, CONTENIMENTO LATERALE E TOTALE, MANTENIMENTO SUPERFICIE ASCIUTTA

1 PROVA SU PANNOLONI MUTANDINA LIVELLO DI ASSORBENZA MOLTO PESANTE MISURA MEDIA
TOGLIERE I PRODOTTI DALLE BUSTE 2 ORE PRIMA DELLE PROVE

2 PRENDERE UN PRODOTTO PER TIPO, PIEGARLI A META' IN SENSO LONGITUDINALE ED APPOGGIARLI
SUL TAVOLO APERTO

Prima fase

VERSARE 400 ML DI ACQUA COLORATA NEL CENTRO, GRADUANDO IL FLUSSO OPPORTUNAMENTE.
ASSICURANDOSI IL TOTALE ASSORBIMENTO
ATTENDERE 15 MINUTI
VERIFICARE CON IL PALMO DELLA MANO E CON UNA PRESSIONE SE IL MATERASSINO E' ASCIUTTO

Seconda fase

VERSARE 400 ML DI ACQUA COLORATA NEL CENTRO, AVENDO CURA CHE VENGA ASSORBITA TUTTA, GRADUANDO
IL FLUSSO OPPORTUNAMENTE.
ATTENDERE 15 MINUTI
VERIFICARE CON IL PALMO DELLA MANO E CON UNA PRESSIONE SE IL MATERASSINO E' ASCIUTTO
PORRE 30 FOGLI DI CARTA ASSORBENTE.
PORRE UN PESO DA 5 KG. ED ATTENDERE UN MINUTO

FOGLI RISULTATI BAGNATI

Ditta A	Ditta B	Ditta C

VERIFICA DELL'ASSORBENZA E DEL MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE ASCIUTTA

PUNTEGGIO 14,00

VERIFICA DELL'EFFICACIA DEGLI INDICATORI DI CAMBIO

PUNTEGGIO 6,00

3 APRIRE I PRODOTTI (UTILIZZATI PER LA PROVA DEL DOPPIO VERSAMENTO)
STRAPPANDO IL TNT SULLA SUPERFICIE CON CAUTELA

VALUTAZIONE DELLA COMPATTEZZA E DELLA TENUTA DEL MATERASSINO

PUNTEGGIO 3,00

VERIFICA VISIVAMENTE DELLA PRESENZA DI UNO STRATO SUPERIORE
DI POLPA DIFFERENZIATA ("POLPA SPECIALE" CHE DA' COMPATTEZZA AL MATERASSINO)

PUNTEGGIO 3,00

4 PRENDERE ALTRI PRODOTTI ASCIUTTI, APERTI E PIEGATI A META' IN SENSO LONGITUDINALE
PROVA SU PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA MOLTO PESANTE MISURA MEDIA
PORRE IL PANNOLONE APERTO SU UN PIANO INCLINATO, VERSARE CON UN IMBUTO 150 ML DI LIQUIDO
PROPRIO SUL CENTRO DEL PRODOTTO (SEGNARE VERSO QUALE LATO SI VERSA IL LIQUIDO E A CHE ORA).

VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI PERDITE LATERALI

PUNTEGGIO 4,00

ATTENDERE 5 MINUTI. RIPETERE LA PROVA VERSANDO NELLO STESSO PUNTO 150 ML DI LIQUIDO (VERSO LO STESSO LATO)

VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI PERDITE LATERALI E/O LA PRESENZA
DI LIQUIDO TRA LA BARRIERA E L'ALETTA IN POLIETILENE

PUNTEGGIO 4,00

5 PRENDERE ALTRI PRODOTTI ASCIUTTI, PIEGARLI A META IN SENSO LONGITUDINALE ED APPOGGIARLI
APERTI SUL TAVOLO PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ASSORBENTE TOTALE

PRENDERE UNA BROCCA GRADUATA CONTENENTE 2 LITRI DI ACQUA, VERSARE IL LIQUIDO NEL CENTRO DEL PRODOTTO, SEMPRE NELLO STESSO PUNTO, UTILIZZANDO UN IMBUTO PER RENDERE COSTANTE IL FLUSSO, CI SI FERMA NON APPENA SI VERIFICA UNA PERDITA DI LIQUIDO AL DI FUORI DEL PANNO.

PROVA SU:

PANNOLONE MUTANDINA INCONTINENZA MOLTO PESANTE MISURA MEDIA

Indicare assorbenza totale da scheda tecnica per ditta

Ditta A	Ditta B	Ditta C

PUNTEGGIO 5,00

PROVE PER COMFORT, PRATICITA' D'USO, COMPATIBILITA' CON NORMALE VESTIZIONE

6 PRENDERE PANNOLONE MUTANDINA INCONTINENZA MOLTO PESANTE MISURA MEDIA
 PRENDERE ALTRI PRODOTTI ASCIUTTI, PIEGARLI A META' IN SENSO LONGITUDINALE ED APPOGGIARLI APERTI SUL TAVOLO PER LA VALUTAZIONE DI COMFORT, VESTIBILITA' E FINITURE

VALUTAZIONE DELLA FORMA DEI PRODOTTI STESI: FORMA "A CONCA"

PUNTEGGIO 2,50

VERIFICA DEL COMFORT E DELLA VESTIBILITA' DI BARRIERE, ELASTICI E BORDI PREPOSTI A CONTENERE EVENTUALI PERDITE LATERALI

PUNTEGGIO 2,00

VALUTAZIONE AL TATTO DEL GRADO DI MORBIDEZZA ED ASSENZA AVALLAMENTI (CIOE' IL COMFORT DEL PRODOTTO A CONTATTO CON LA CUTE)

PUNTEGGIO 2,00

VALUTAZIONE AL TATTO DELLA PRESENZA DI "SCALINO" SUL BORDO POSTERIORE DEL MATERASSINO (GRAVE CAUSA DI FASTIDIO O DECUBITO)

PUNTEGGIO 2,00

VALUTARE LA SAGOMATURA E LA "VESTIBILITA' " DEI PRODOTTI

PUNTEGGIO 1,50

VALUTAZIONE INGOMBRO E VOLUMINOSITA'

PUNTEGGIO 1,50

VALUTAZIONE DELLA RIPOSIZIONABILITA' DEGLI ADESIVI (AMPIEZZA DELLA ZONA IN CUI E' POSSIBILE RIPOSIZIONARLI E FUNZIONALITA' DEGLI STESSI)

PUNTEGGIO 7,00

VISIBILITA' DEL CODICE COLORE CHE IDENTIFICA TAGLIE E LIVELLI DI ASSORBENZA

PUNTEGGIO 2,50

PUNTEGGIO TOTALE 60,00
PANNOLONE MUTANDINA CON ADESIVI

PANNOLONI CON CINTURA TRASPIRANTE

PROVE PER ASSORBENZA, CONTENIMENTO LATERALE E TOTALE, MANTENIMENTO SUPERFICIE ASCIUTTA

**1 PROVA SU PANNOLONE CON CINTURA LIVELLO DI ASSORBENZA GRAVE MISURA MEDIA
TOGLIERE PRODOTTO DALLA BUSTA 2 ORE PRIMA DELLE PROVE**

**2 PRENDERE UN PRODOTTO, PIEGARLO A META' IN SENSO LONGITUDINALE ED APPOGGIARLO
SUL TAVOLO APERTO**

Prima fase

VERSARE 400 ML DI ACQUA COLORATA NEL CENTRO, GRADUANDO IL FLUSSO OPPORTUNAMENTE.
ASSICURANDOSI IL TOTALE ASSORBIMENTO
ATTENDERE 15 MINUTI.
VERIFICARE CON IL PALMO DELLA MANO E CON UNA PRESSIONE SE IL MATERASSINO E' ASCIUTTO

Seconda fase

VERSARE 400 ML DI ACQUA COLORATA NEL CENTRO, AVENDO CURA CHE VENGA ASSORBITA TUTTA, GRADUANDO IL FLUSSO OPPORTUNAMENTE.
ATTENDERE 15 MINUTI.
VERIFICARE CON IL PALMO DELLA MANO E CON UNA PRESSIONE SE IL MATERASSINO E' ASCIUTTO
PORRE 30 FOGLI DI CARTA ASSORBENTE.
PORRE UN PESO DA 5 KG. ED ATTENDERE UN MINUTO.

FOGLI RISULTATI BAGNATI

Ditta A	Ditta B	Ditta C

VERIFICA DELL'ASSORBENZA E DEL MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE ASCIUTTA

PUNTEGGIO 60,00

VERIFICA DELL'EFFICACIA DEGLI INDICATORI DI CAMBIO

PUNTEGGIO 25,00

**3 APRIRE I PRODOTTI (UTILIZZATI PER LA PROVA DEL DOPPIO VERSAMENTO)
STRAPPANDO IL TNT SULLA SUPERFICIE CON CAUTELA**

VALUTAZIONE DELLA COMPATTEZZA E DELLA TENUTA DEL MATERASSINO

PUNTEGGIO 15,00

VERIFICA VISIVAMENTE DELLA PRESENZA DI UNO STRATO SUPERIORE
DI POLPA DIFFERENZIATA ("POLPA SPECIALE" CHE DA' COMPATTEZZA AL MATERASSINO)

PUNTEGGIO 10,00

**4 PRENDERE ALTRI PRODOTTI ASCIUTTI, APERTI E PIEGATI A META' IN SENSO LONGITUDINALE
PROVA ESEGUITA CON PANNOLONE CON CINTURA PER INCONTINENZA MOLTO PESANTE
PORRE IL PANNOLONE APERTO SU UN PIANO INCLINATO, VERSARE CON UN IMBUTO 150 ML DI LIQUIDO
PROPRIO SUL CENTRO DEL PRODOTTO (SEGNANDO VERSO QUALE LATO SI VERSA IL LIQUIDO E A CHE ORA).**

VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI PERDITE LATERALI

PUNTEGGIO 15,00

ATTENDERE 5 MINUTI. RIPETERE LA PROVA VERSANDO NELLO STESSO PUNTO 150 ML DI LIQUIDO (VERSO LO STESSO LATO)

VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI PERDITE LATERALI E/O LA PRESENZA
DI LIQUIDO TRA LA BARRIERA E L'ALETTA IN POLIETILENE

PUNTEGGIO 15,00

5 PRENDERE ALTRI PRODOTTI ASCIUTTI, PIEGATI A META IN SENSO LONGITUDINALE ED APPOGGIATI APERTI SUL TAVOLO PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ASSORBENTE TOTALE

PRENDERE UNA BROCCA GRADUATA CONTENENTE 2 LITRI DI ACQUA, VERSARE IL LIQUIDO NEL CENTRO DEL PRODOTTO, SEMPRE NELLO STESSO PUNTO, UTILIZZANDO UN IMBUTO PER RENDERE COSTANTE IL FLUSSO, CI SI FERMA NON APPENA SI VERIFICA UNA PERDITA DI LIQUIDO AL DI FUORI DEL PANNO. PROVA DA ESEGUIRE SU:

PANNOLONE CON CINTURA INCONTINENZA MOLTO PESANTE MISURA MEDIA
 PANNOLONE CON CINTURA INCONTINENZA GRAVE MISURA MEDIA

Indicare assorbenza totale da scheda tecnica per ditta
 Ditta A Ditta B Ditta C

Ditta A	Ditta B	Ditta C

PUNTEGGIO 25,00

PROVE PER COMFORT, PRATICITA' D'USO, COMPATIBILITA' CON NORMALE VESTIZIONE

6 PRENDERE ALTRI PRODOTTI ASCIUTTI, PIEGARLI A META' IN SENSO LONGITUDINALE ED APPOGGIARLI APERTI SUL TAVOLO PER LA VALUTAZIONE DI COMFORT, VESTIBILITA' E FINITURE

VALUTAZIONE DELLA FORMA DEI PRODOTTI STESI: LA FORMA "A CONCA" (SI CONSIDERA MIGLIORE RISPETTO A QUELLA PIATTA)

PUNTEGGIO 10,00

VERIFICA DEL COMFORT E DELLA VESTIBILITA' DI BARRIERE, ELASTICI E BORDI PREPOSTI A CONTENERE EVENTUALI PERDITE LATERALI

PUNTEGGIO 6,00

VALUTAZIONE AL TATTO DEL GRADO DI MORBIDEZZA ED ASSENZA AVALLAMENTI (CIOE' IL COMFORT DEL PRODOTTO A CONTATTO CON LA CUTE)

PUNTEGGIO 6,00

VALUTAZIONE AL TATTO DELLA PRESENZA DI "SCALINO" SUL BORDO POSTERIORE DEL MATERASSINO (GRAVE CAUSA DI FASTIDIO O DECUBITO)

PUNTEGGIO 5,00

VALUTARE LA SAGOMATURA E LA "VESTIBILITA' " DEI PRODOTTI

PUNTEGGIO 6,00

INGOMBRO E VOLUMINOSITA'

PUNTEGGIO 5,00

RIPOSIZIONABILITA' DEL VELCRO O SIMILE

PUNTEGGIO 21,00

VISIBILITA' DEL CODICE COLORE CHE IDENTIFICA TAGLIE E LIVELLI DI ASSORBENZA

PUNTEGGIO 6,00

PUNTEGGIO TOTALE 230,00
PANNOLONE
MUTANDINA CON CINTURA

PANNOLONI FISIOANATOMICI

PROVE PER COMFORT, PRATICITA' D'USO, COMPATIBILITA' CON NORMALE VESTIZIONE

1 PROVA SU PANNOLONI FISIOANATOMICI SAGOMATI PER INCONTINENZA MEDIA PIEGARLI A META' IN SENSO LONGITUDINALE ED APPOGGIARLI APERTI SUL TAVOLO PER LA VALUTAZIONE DI COMFORT, VESTIBILITA' E FINITURE

VALUTAZIONE DELLA FORMA DEI PRODOTTI STESI: FORMA "A CONCA"

PUNTEGGIO 5,00 

VERIFICA DEL COMFORT E DELLA VESTIBILITA' DI BARRIERE O ELASTICI
PREPOSTI A CONTENERE EVENTUALI PERDITE LATERALI

PUNTEGGIO 3,00 

VALUTAZIONE AL TATTO DEL GRADO DI MORBIDEZZA ED ASSENZA AVALLAMENTI
(CIOE' IL COMFORT DEL PRODOTTO A CONTATTO CON LA CUTE)

PUNTEGGIO 3,00 

VALUTAZIONE AL TATTO DELLA PRESENZA DI "SCALINO" SUL BORDO POSTERIORE
DEL MATERASSINO (GRAVE CAUSA DI FASTIDIO O DECUBITO)

PUNTEGGIO 3,00 

VALUTARE LA SAGOMATURA E LA "VESTIBILITA' " DEI PRODOTTI

PUNTEGGIO 3,00 

INGOMBRO E VOLUMINOSITA'

PUNTEGGIO 1,00 

VISIBILITA' DEL CODICE COLORE CHE IDENTIFICA TAGLIE E LIVELLI DI ASSORBENZA

PUNTEGGIO 2,00 

PUNTEGGIO 20,00 

TOTALE
PANNOLONE
FISIOANATOMICO

SLIP ELASTICI DI FISSAGGIO


1 VALUTAZIONE DELLA MUTANDINA ELASTICA, NECESSARIA ALLA APPLICAZIONE DEL SAGOMATO (LA QUALITA' DELLA MUTANDINA E' FONDAMENTALE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA "DUE PEZZI"). PRESE CINQUE MUTANDE PER OGNI CONCORRENTE (N° CINQUE TAGLIE):

VALUTAZIONE DELLA MORBIDEZZA, SOPRATTUTTO IN CORRISPONDENZA DEL
GIROCOSCIA E DEL GIOVITA. VALUTAZIONE DELL'ELASTICITA' E DELL'IDONEITA'
A FISSARE CORRETTAMENTE IL SAGOMATO A CONTATTO DEL CORPO DELL'INCONTINENTE.

PUNTEGGIO 5,00 

VERIFICA DELLA RESISTENZA E DEL MANTENIMENTO DELLA ELASTICITA' DOPO 15 LAVAGGI CON DETERGENTE,
UTILIZZANDO I SACCHI LAVANDERIA, E RELATIVE ASCIUGATURE.

PUNTEGGIO 5,00 

PUNTEGGIO
TOTALE
SLIP 10,00 

PANNOLINI TIPO ASSORBENTI


- 1** PROVA SU PANNOLINI TIPO ASSORBENTI DI GRADO MOLTO PESANTE
PRENDERE I PRODOTTI ASCIUTTI ED APPOGGIARLI
APERTI SUL TAVOLO PER LA VALUTAZIONE DI COMFORT, VESTIBILITA' E FINITURE

VALUTAZIONE COMPATTEZZA, STABILITA, MORBIDEZZA DEL MATERASSINO ASSORBENTE

PUNTEGGIO 4,00 

FISIOANATOMICITA' ED EFFICACIA DELL'ADERENZA DELL'ADESIVO ALLA MUTANDINA

PUNTEGGIO 6,00 

PUNTEGGIO TOTALE 10,00 
PANNOLINO
TIPO ASSORBENTI

MUTANDINE ASSORBENTI SENZA ADESIVI

per utilizzatori autonomi o parzialmente autosufficienti

- 1** PROVA SU PANNOLONE MUTANDINA SENZA ADESIVI INCONTINENZA MODERATA MISURA M
PRENDERE I PRODOTTI ASCIUTTI ED APPOGGIARLI
APERTI SUL TAVOLO PER LA VALUTAZIONE DI COMFORT, VESTIBILITA' E FINITURE

VALUTAZIONE COMPATTEZZA, STABILITA, MORBIDEZZA DEL MATERASSINO ASSORBENTE

PUNTEGGIO 5,00 

ADEGUATA FORMA FISIOANATOMICA, VESTIBILITA'


PUNTEGGIO 3,00 

MORBIDEZZA ELASTICI AL GIROGAMBA E ALL'INGUINE

PUNTEGGIO 3,50 

ASSENZA DI CUCITURE INTERNE, QUALITA' DEL SISTEMA LATERALE DI STRAPPO

PUNTEGGIO 3,50 

PUNTEGGIO TOTALE 15,00 
PANNOLONE
MUTANDINA SENZA ADESIVI

TRAVERSE

1 TRAVERSA (cm. 60x60 e cm. 60x90)

ATTRAVERSO L'ESAME A VISTA VALUTAZIONE:

MISURE RICHIESTE


UNIFORMITA' DELLO STRATO DI POLPA DI CELLULOSA

GOFFRATURA DELLO STRATO ASSORBENTE E FINITURA

MORBIDEZZA DEL TNT E DEL POLIETILENE


BORDI RIPIEGATI CONTRO LE PERDITE

SUPERFICIE ESTERNA ANTISCIVOLO E COLORATO PER DIFFERENZIARSI DALLA BIANCHERIA PIANA

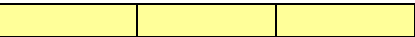
PUNTEGGIO 25,00 


BAGNARE CON 600 ML DI LIQUIDO IN PROSSIMITA' DEL BORDO:

VERIFICA DELLA DISTRIBUZIONE DEI LIQUIDI E DELL'IDONEO INCOLLAGGIO DELLE PARTI (BORDI ANTIPERDITA)

PUNTEGGIO 30,00 


RESISTENZA ALLA TRAZIONE

PUNTEGGIO 25,00 

PUNTEGGIO
TOTALE
TRAVERSE 80,00 

COMPLETEZZA TAGLIE

1 COMPLETEZZA TAGLIE PRODOTTI INCONTINENZA

PUNTEGGIO
COMPLETEZZA 15,00 

CREME LINEA IGIENE

1

LOZIONE IDRATANTE PER LA PROTEZIONE DELLA CUTE CON DOSATORE

VERIFICARE (DA SCHEDA TECNICA E /O CONFEZIONE) CHE IL PRODOTTO SIA STUDIATO PER LA CUTE DELICATA E COMPROMESSA, ANCHE IN PRESENZA DI DERMATITI E IPERCHERATOSI. PROVARE IL PRODOTTO PER VERIFICARNE LA FLUIDITA', SE E' FACILMENTE SPALMABILE, SE SI ASSORBE FACILMENTE, SENZA LASCIARE LA PELLE TROPPO GRASSA, APPICCIICOSA VERIFICARE CHE LA PROFUMAZIONE SIA LEGGERA E NON INVASIVA PRESENZA DI UN DOSATORE FUNZIONALE

PUNTEGGIO 5,00

2

DETERGENTE LA DETERSIONE DEI CAPELLI E DELLA CUTE (DOCCIA E SHAMPOO) CON DOSATORE

VERIFICARE (DA SCHEDA TECNICA E /O CONFEZIONE) CHE IL PRODOTTO SIA STUDIATO PER L'IGIENE DELLA CUTE DELICATA E COMPROMESSA. PER TUTTO IL CORPO, CAPELLI INCLUSI. PROVARE IL PRODOTTO PER VERIFICARNE LA FLUIDITA' E CHE SIA POCO SCHIUMOGENO (PER FACILITARNE IL RISCIAQUO). PROFUMAZIONE LEGGERA, NON INVASIVA PRESENZA DI UN DOSATORE FUNZIONALE

PUNTEGGIO 5,00

3

CREMA DETERGENTE PER L'IGIENE DELLA CUTE, IDEALE PER LAVAGGI AREA PERINEALE DA 500 ML. E DA 1000 ML CON DOSATORE

VALUTARE (DA SCHEDA TECNICA E CONFEZIONE) CHE IL PRODOTTO SIA PRIVO DI TENSIOATTIVI. VALUTARE CHE SIA IDONEO A DETERGERE E IDRATARE LA PELLE SENZA NECESSITA' DI RISCIAQUO (CARATTERISTICHE SU SCHEDA TECNICA E MODO D'USO IN ETICHETTA) VALUTARE CHE IL PRODOTTO ABBIA UN Ph NEUTRO 5.5

VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA DERMATOLOGICAMENTE TESTATO O COMUNQUE STUDIATO PER L'IGIENE DELLA CUTE DELICATA (SENESCENTE). PROVARE IL PRODOTTO (UNA PICCOLA QUANTITA' SU UNA SALVIETTA APPENA INUMIDITA) VERIFICARE LA CAPACITA' DI DETERSIONE E PIACEVOLEZZA SULLA CUTE, LA PROFUMAZIONE NON INVASIVA E LA CAPACITA' DI LASCIARE LA CUTE IDRATATA MA NON APPICCIICOSA PRESENZA DI UN DOSATORE FUNZIONALE

PUNTEGGIO 10,00

PUNTEGGIO TOTALE CREME 20,00

SALVIETTE MONOUSO

1

PROVA SU SALVIETTE MONOUSO DIMENSIONI RICHESTE CIRCA CM.25X33

ESAME VISIVO E PROVA SU SALVIETTE BAGNATE

VERIFICA DI BUONA PERMEABILITA' DI LIQUIDI
RESISTENZA ALLA TENSIONE
IDONEITA' A DETERGERE ED ASCIUGARE LA CUTE
MORBIDEZZA
ASSENZA DI RILASCIO DI PARTICELLE

PUNTEGGIO TOTALE SALVIETTE 50

BAVAGLIE

1 PROVA SU BAVAGLIA DIMENSIONI RICHIESTE CIRCA 37X68

ESAME VISIVO

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' MEDIANTE L'IMPERMEABILITA'
LA FUNZIONALITA' DELLA TASCA (CONTENIMENTO)
LA POSSIBILITA' DI RIUTILIZZO DEL PRODOTTO
LA CONFORTEVOLEZZA E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO

PUNTEGGIO 35
TOTALE
BAVAGLIE



SALVAMATERASSO

1 PROVA SU SALVAMATERASSO DIMENSIONI RICHIESTE CIRCA 175X85

ESAME VISIVO

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' MEDIANTE L'IMPERMEABILITA'
CONFORTEVOLEZZA, TRASPIRABILITA'
RESISTENZA ALLA TENSIONE

PUNTEGGIO 5
TOTALE
SALVAMATERASSO



550,00

RIEPILOGO PUNTEGGI DELLA QUALITA'

Ditta A Ditta B Ditta C

- 1 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE PANNOLONI MUTANDINA CON ADESIVI
- 2 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE PANNOLONI CON CINTURA
- 3 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE PANNOLONI FISIOANATOMICO SAGOMATO
- 4 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MUTANDINE ELASTICHE
- 5 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE PANNOLINI TIPO ASSORBENTI
- 6 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE MUTANDINA ASSORBENTE SENZA ADESIVI
- 7 VALUTAZIONE DELLA COMPLETEZZA DELLE TAGLIE DEI PRODOTTI
- 8 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TRAVERSE
- 9 VALUTAZIONE DELLE CREME
- 10 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE SALVIETTE
- 11 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE BAVAGLIE
- 12 VALUTAZIONE CARATTERISTICHE SALVAMATERASSO

Punti max	60	6,00
Punti max	230	23,00
Punti max	20	2,00
Punti max	10	1,00
Punti max	10	1,00
Punti max	15	1,50
Punti max	15	1,50
Punti max	80	8,00
Punti max	20	2,00
Punti max	50	5,00
Punti max	35	3,50
Punti max	5	0,50

Punti max **550** **55,00**

13 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Punti max **3**

--	--	--

--	--	--

14 PROGETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA, POST VENDITA E FORMAZIONE

Punti max **12**

- Personale impiegato nell'assistenza post vendita
- Assistenza infermieristica e post vendita
- Piano formativo rivolto al personale assistenziale delle diverse strutture residenziali
- Programma formativo rivolto a tutto il personale delle strutture residenziali
- Proposte innovative

Punti max	1,5
Punti max	7
Punti max	2
Punti max	0,5
Punti max	1

--	--	--

TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'

Punti max **70**

--	--	--